



UltraFast
Innovations

YOUR KEY to innovation and success



XUV Phase Retarder AURORA


Our XUV Phase Retarder acts as a quarter waveplate to turn linearly polarized XUV light into circularly polarized light without introducing noticeable dispersion. The phase retarder achieves close-to-circular polarization of $P_c=0.75$ and obtains $> 25\%$ transmission around 66 eV photon energy, where the Ni M_2/M_3 edge locates [1].

A broad spectral range from 40 to 85 eV is supported to cover the M_2/M_3 edge of 3 transition metals - Fe, Co and Ni.

The retarder uses a transmission optimized, four mirror grazing incidence reflection geometry that induces a quarter wave phase offset between the s- and p-polarization components of a linearly polarized input XUV beam. At the Ni M_2/M_3 transition up to 3% dichroism contrast is observed (i.e. $> 85\%$ of the theoretical value) [1].

A clear aperture of 3 mm will allow the low divergent XUV to pass through without clipping. Our XUV Phase Retarder is ideal-

ly geared to be combined with ultrafast high-harmonic XUV sources adding spin-sensitivity to conventional laser based pump-probe experiments via attosecond magnetic circular dichroism detection.

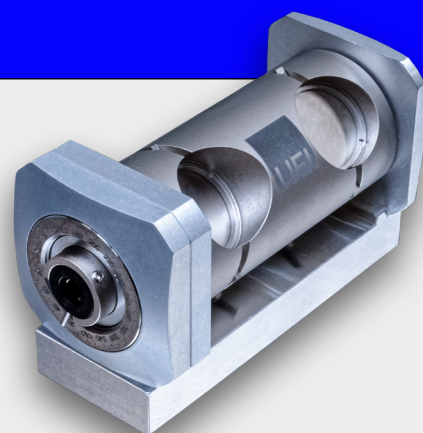

Key Product Features:

- Create circularly polarized XUV light without adding dispersion (ideal for attosecond applications)
- Up to $\approx 40\%$ max transmission (40-85 eV version)
- Up to $\approx 30\%$ max transmission (10-40 eV version)
- Compact design, with minimum change in the delay line
- Broad spectral range covering 40 – 85 eV (high-energy version) or 10 – 40 eV (low-energy version)
- Entrance and exit iris diaphragms for alignment
- Easy to implement in existing setups

Characteristics:

Spectral Range	10-40 eV	40-85 eV
Avg Transmission	$>25\%$	$>25\%$
Max Ellipticity P_c^1	1.0 @ 21 eV	0.85 @ 53eV (Fe) 0.75 @ 66 eV (Ni)
Extra Beam Path	3 mm	3 mm
Clear Aperture	3 mm	3 mm
Footprint	51mm (W) x 118mm (L)	51mm (W) x 118mm (L)

¹Degree of Ellipticity expressed as Stokes Parameters $P_c = S3/S0$

TII 東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS
グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供



本社: 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.ビル Tel. 03-3686-4711
営業所: 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル Tel. 06-6393-7411
URL: <https://www.tokyoinst.co.jp> Mail: sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company

UNISOKU 超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット

LOTIS TII Nd:YAGレーザー、Ti:SLレーザー
OPOLレーザー

●本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。(製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです)
●本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
●本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

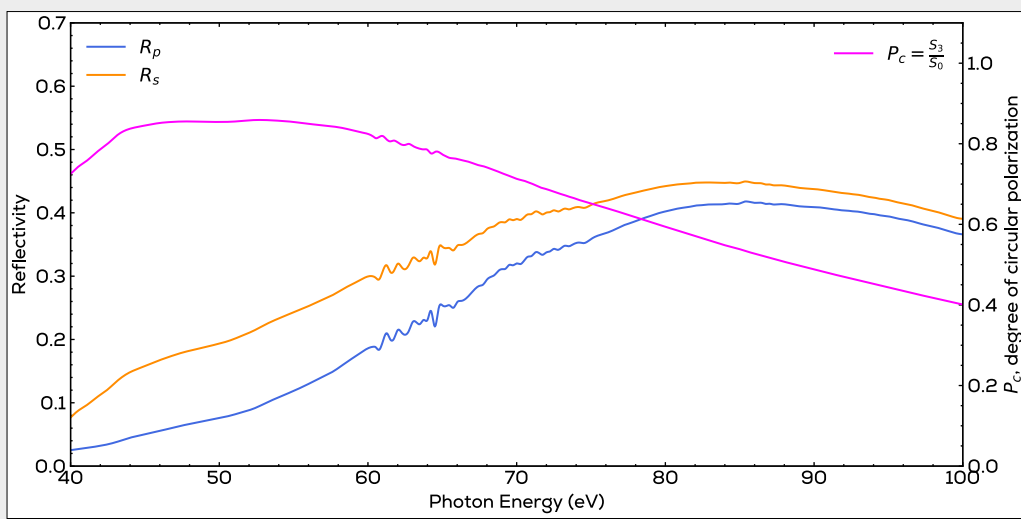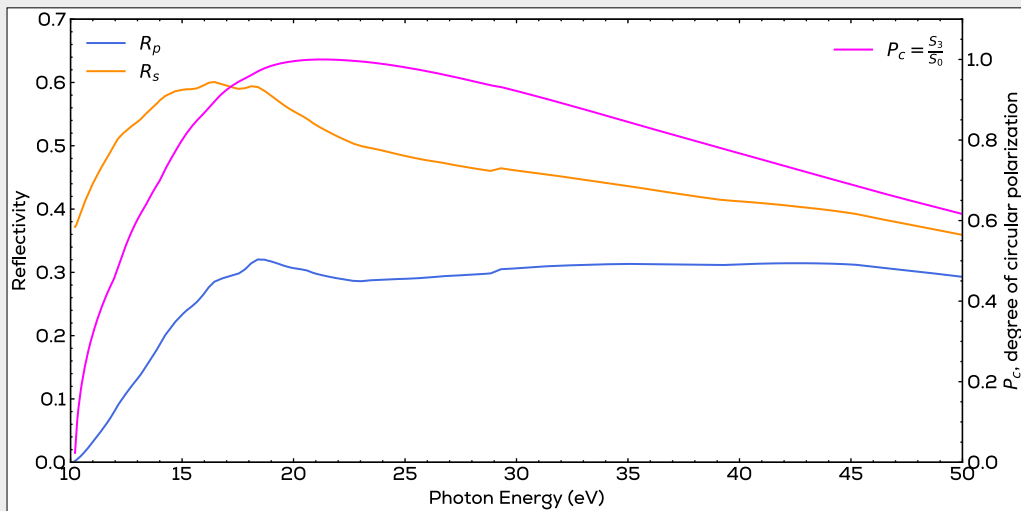

Element	Fe	Co		Ni	
Edge	M_2/M_3	M_2	M_3	M_2	M_3
Energy	52.7 eV	58.9 eV	59.9 eV	66.2 eV	68 eV
Transmission	9%	17%	18%	26%	30%

References:

[1] Siegrist, F., Gessner, J.A., Ossiander, M. et al. Light-wave dynamic control of magnetism. *Nature* **571**, 240-244(2019).