


アメロイドコンストリクター

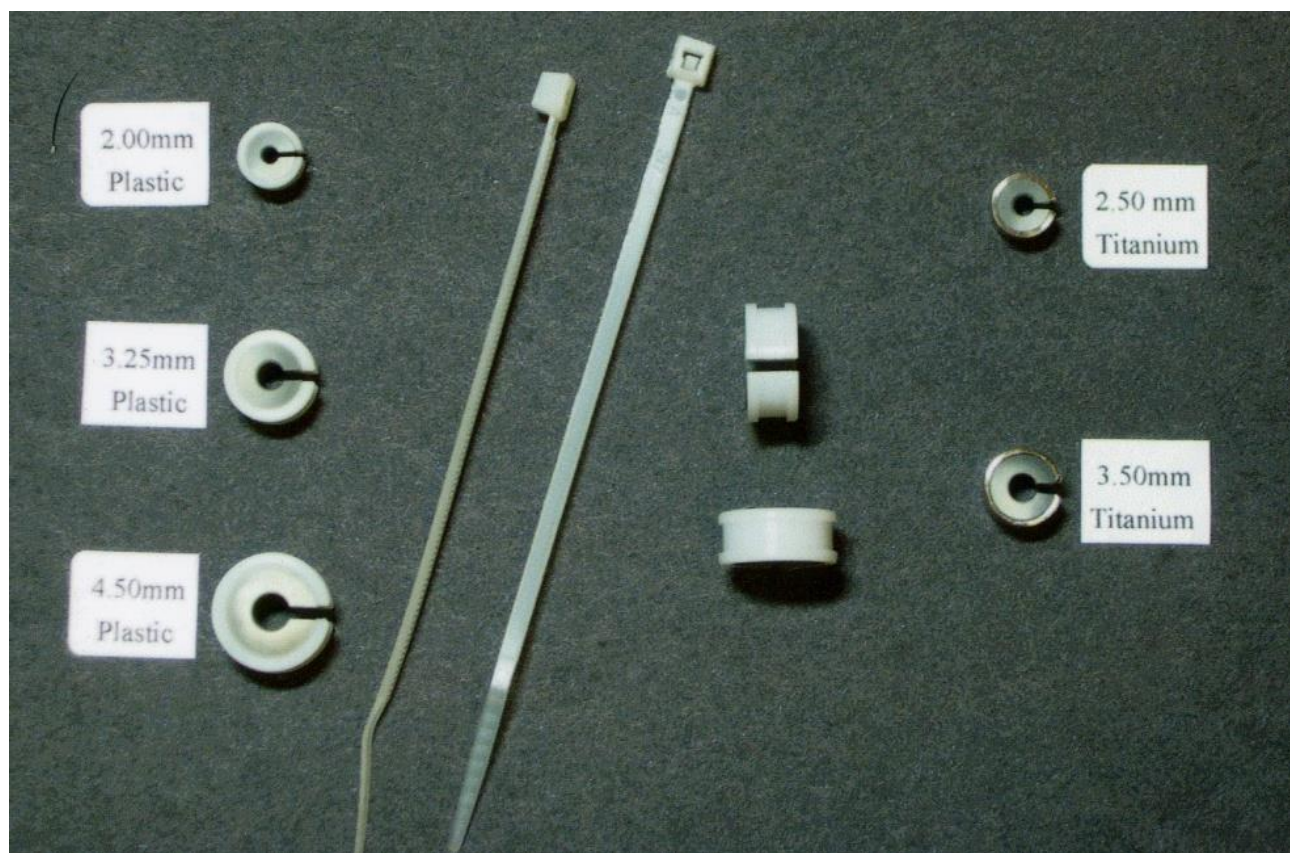

アメロイドコンストリクターは、プラスチック製または金属製のリングの内側にドーナツ状のカゼインコアをもつ閉鎖具です。

血管周囲に装着後に水分を徐々に吸収し、カゼインコアが膨張することにより、中心の穴が狭くなっていき、ゆっくりと血管を閉塞させます。

カゼインが円柱状でリングのないSuture styleもあります。

- 用途 -

- 血管狭窄の再現および再循環実験。
- 慢性実験。

※ 使用は実験用途に限られます。

TII 株式会社 東京インストルメンツ

東京本社 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14

Tel: 03-3686-4711(代) Fax: 03-3686-0831

email: sales@tokyoinst.co.jp

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル

Tel: 06-6393-7411(代) Fax: 06-6393-7055

email: osaka@tokyoinst.co.jp

Webpage <http://www.tokyoinst.co.jp>

マウス用

製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
SW-MICE-0.5	0.5 mm	0.5 mm	3.25 mm	1.28 mm	¥125,000
SW-MICE-0.75	0.75 mm	0.5 mm	3.25 mm	1.28 mm	¥125,000
SW-MICE-1.00	1.0 mm	0.6 mm	3.25 mm	1.28 mm	¥125,000
SW-MICE-1.25	1.25 mm	0.6 mm	3.25 mm </td <td>1.28 mm</td> <td>¥125,000</td>	1.28 mm	¥125,000

Stainless steel

製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
COR-1.50-SS	1.5 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-1.75-SS	1.75 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-2.00-SS	2.0 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-2.25-SS	2.25 mm	0.8 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-2.50-SS	2.5 mm	0.8 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-2.75-SS	2.75 mm	1.0 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000
COR-3.00-SS	3.0 mm	1.0 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥108,000
COR-3.50-SS	3.5 mm	1.3 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥108,000
COR-4.00-SS	4.0 mm	1.3 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥108,000

Stainless steel

製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
SP-1.00-SS	1.00 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-1.25-SS	1.25 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-1.50-SS	1.50 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-1.75-SS	1.75 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-190-SS	1.90 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-2.00-SS	2.00 mm	0.6 mm	6.3 mm	3.5 mm	¥108,000
SP-2.40-SS	2.40 mm	1.0 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥108,000

Plastic MRI

製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
MRI-2.00-PL	2.0 mm	0.6 mm	8.0 mm	5.0 mm	¥112,000
MRI-2.25-PL	2.25 mm	0.8 mm	8.0 mm	5.0 mm	¥112,000
MRI-2.50-PL	2.5 mm	0.8 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥112,000
MRI-2.75-PL	2.75 mm	1.0 mm	11.1 mm	5.5 mm	¥112,000
MRI-3.00-PL	3.0 mm	1.0 mm	11.1 mm	5.5 mm	¥112,000
MRI-3.50-PL	3.5 mm	1.3 mm	12.5 mm	5.5 mm	¥112,000
MRI-4.00-PL	4.0 mm	1.3 mm	12.5 mm	5.5 mm	¥112,000
MRI-4.50-PL	4.5 mm	1.6 mm	14.3 mm	6.0 mm	¥112,000
MRI-5.00-PL	5.0 mm	1.6 mm	14.3 mm	6.0 mm	¥112,000

Titanium MRI


製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
MRI-1.50-TI	1.5 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-1.75-TI	1.75 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-2.00-TI	2.0 mm	0.6 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-2.25-TI	2.25 mm	0.8 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-2.50-TI	2.5 mm	0.8 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-2.75-TI	2.75 mm	1.0 mm	8.0 mm	4.5 mm	¥112,000
MRI-3.00-TI	3.0 mm	1.0 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥112,000
MRI-3.50-TI	3.5 mm	1.3 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥112,000
MRI-4.00-TI	4.0 mm	1.3 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥112,000

ラージサイズ

製品名	"A" Lumen	"B" Gap	"C" Cuff	"D" Length	価格(税抜)
NW-3.5	3.5 mm	1.3 mm	9.5 mm	5.0 mm	¥150,000
NW-5.0	5.0 mm	1.5 mm	11.1 mm	5.0 mm	¥150,000
NW-6.0	6.0 mm	1.5 mm	12.5 mm	5.5 mm	¥160,000
NW-6.5	6.5 mm	2.0 mm	15.9 mm	6.0 mm	¥160,000
NW-7.0	7.0 mm	2.0 mm	15.9 mm	6.0 mm	¥160,000
NW-7.5	7.5 mm	2.5 mm	18.3 mm	6.5 mm	¥160,000
NW-8.0	8.0 mm	2.5 mm	18.3 mm	6.5 mm	¥160,000
NW-9.0	9.0 mm	2.5 mm	18.3 mm	6.5 mm	¥160,000

Suture Style

製品名	"A" Diameter	"B" Length	"C" Distance	"D" Hole Diameter	価格(税抜)
SUT-E-5.5x1.5	5.5 mm	1.5 mm	4.0 mm	0.5 mm	¥108,000
SUT-4.0x2.0	4.0 mm	2.0 mm	5.5 mm	0.5 mm	¥108,000
SUT-5.0x5.0	5.0 mm	5.0 mm	3.5 mm	0.5 mm	¥108,000
SUT-5.5x2.0	5.5 mm	2.0 mm	4.0 mm	0.5 mm	¥108,000

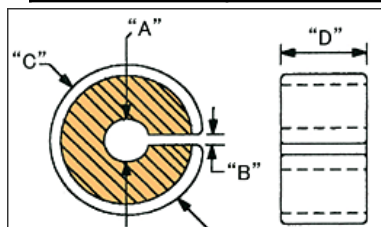

← 通常のアモロイドコンストリクター

Suture style →

