

Nonlinear Crystal Oven with built-in Thermocontroller


TK8

TK8 is compact oven with built-in thermocontroller for nonlinear crystals to keep them at stabilized temperature in range 30...80 °C.

The crystals with aperture up to 15×15 mm and length up to 20 mm can be mounted. TK8L and TK8XL ovens are designed for crystal length up to 30 mm and 50 mm accordingly. Each oven is made exactly for specific crystal aperture size, so it cannot be used for different size crystals.

Crystal oven can be used in two ways. First one is automatic operation. This case temperature is preset in advance and stored in internal controller. There is enough to connect DC power 12...24 V to keep crystal at preset temperature. LED indicator on top of oven shows that crystal temperature is reached preset value. Temperature setting can factory preset or customer can set it himself using CAN-USB converter (sold separately) and CanBrowser software. Another way of operation gives possibility change crystal temperature any time as needed using CAN interface.

On request we can manufacture ovens for crystals with aperture up to 60×60 mm or even larger.

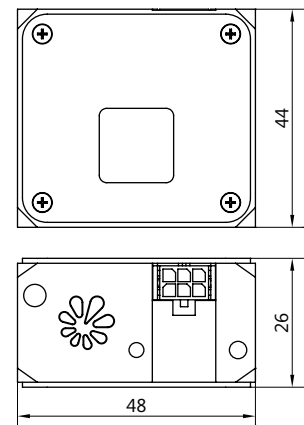

TK8 dimensions

MOUNT FOR CRYSTAL OVENS



Mount for fine tuning of TK8 crystal ovens angle. The tuning range is $\pm 2.5^\circ$.

General Specifications

Model	TK8	TK8L	TK8XL
Maximum crystal dimensions	15×15×20 mm	15×15×30 mm	15×15×50 mm
Temperature range	30 – 80 °C		
Temperature stability	± 0.2 °C		
Power consumption	<6 W	<6 W	<9 W
Control interface	CAN		
Crystal center position above pad	16 mm		
Dimensions, W×H×D	48×44×26 mm	48×44×36 mm	48×44×56 mm

Specifications are subject to changes without advance notice.



東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS

本社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.I.ビル Tel. 03-3686-4711

営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル Tel. 06-6393-7411

グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

URL：<https://www.tokyoinst.co.jp> Mail：sales@tokyoinst.co.jp



超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット



Nd:YAGレーザー、Ti:SLレーザー
OPOレーザー