


Electro VISIR

WHITE LIGHT SUPERCONTINUUM LASER



Our **ELECTRO VISIR** series is a broadband laser with a unique spectrum spike free below 1540 nm. They deliver a convenient balanced spectrum whether you want to use the visible band or the near-infrared band.

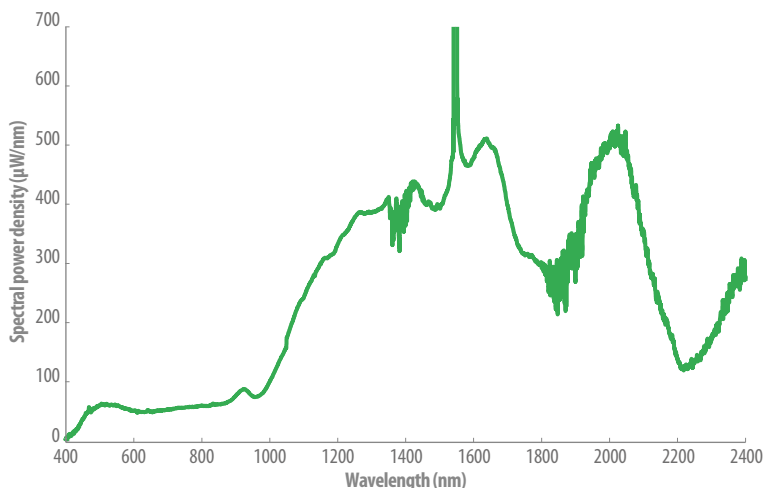

- Supercontinuum lasers
- SCIENTIFIC
- MID-POWER




FEATURES

- From visible to IR 450 - 2500 nm
- Singlemode TEM 00
- Various repetition rate
100 kHz and 250 kHz
- High energy per pulse > 3 µJ
- Total average power up to 650 mW
- Maintenance-free
- Reliable all fibered compact
broadband source
- IR extension available

APPLICATIONS

- Optical component testing
- OCT
- Spectroscopy
- Metrology, LIDAR
- High resolution imaging

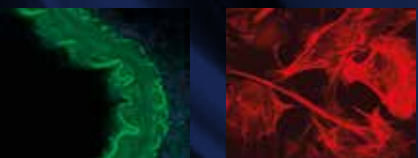

LEUKOS
Make a bright future

Electro VISIR

WHITE LIGHT SUPERCONTINUUM LASER

ELECTRO VISIR can be triggered externally for easy synchronization set-up.

OPTICAL SPECIFICATIONS		ELECTRO 250 VISIR
Spectral bandwidth	min	< 450 nm
	max	2 600 nm
Total average power		> 650 mW
Seed repetition rate*		250 kHz
Timing jitter		< 10 ns
Seed pulse width		~ 1 ns
Power stability		+/- 1 %
Spatial mode		Singlemode TEM 00
Polarization state		Unpolarized
Output connection		FC/APC Collimator (~ 1 meter armored cable)
OTHER SPECIFICATIONS		
Control interface		Front panel and USB
Operating temperature		+5°C to +40°C non condensing
Weight		< 8 kg
Dimensions (LxWxh)		485x250x134 mm
Power requirements		100-240 V, 50/60 Hz

*External or
internal trigger

ADDITIONAL EQUIPMENT

Achromatic collimated output

Easy fiber coupling with Pop

Tunable filters : AOTF, monochromators, custom

OPTION



Collimated output

LEUKOS
Make a bright future

+33 (0)5 87 20 00 25
contactus@leukos-systems.com
www.leukos-systems.com

All specifications are subject to change without notice

— Supercontinuum lasers
— SCIENTIFIC
— MID-POWER

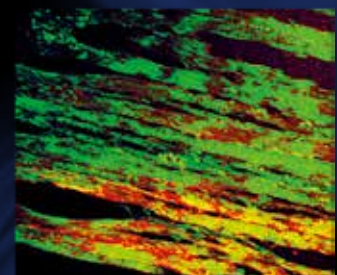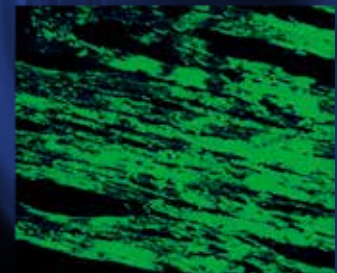

CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE AND
SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。（製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです）
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。